



SIN PERDIDAS DE
MEDICACIÓN



SIN RIESGO DE
EXPOSICIÓN



SIN ERRORES



TACKLEN



RX CRUSH®

TRITURADOR DE
MEDICAMENTOS

SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL SANITARIO

Con el objetivo de minimizar la incidencia de los accidentes relacionados con el manejo de medicamentos peligrosos, se están estableciendo directrices dirigidas a implantar medidas de seguridad para el trabajador durante el manejo de medicamentos peligrosos en el entorno hospitalario.

Durante años hemos observado las deficiencias de los dispositivos para la trituración de medicamentos y de los métodos de administración. La obstrucción de los tubos por una trituración inadecuada y la exposición del personal sanitario al polvo de los

medicamentos son situaciones que se han dado en el entorno laboral.

RX CRUSH® es un sistema de trituración de comprimidos que elimina estas deficiencias y que cumple la normativa de la Joint Commission (JCAHO) que requiere la contención del polvo de la medicación y la conexión a jeringas ENFit® de alimentación enteral.

El sistema de trituración de comprimidos **RX CRUSH®** es un sistema sellado que pulveriza los comprimidos a través de su acción patentada de aplastamiento y trituración.

¿Pérdida de dosis con otros sistemas?

**TACKLEN
GARANTIZA**

una bolsa que asegura pérdidas mínimas debido a su diseño aerodinámico.





NUEVA
CONEXIÓN
ENFIT
MÁS
SEGURA

BENEFICIOS

Fácil uso

Los medicamentos disueltos se envían rápida y fácilmente a los tubos de alimentación de las bolsas compatibles con ENFit®.

Efectivo

Se elimina la obstrucción de los tubos de alimentación por una mala trituración de los comprimidos eliminando el riesgo de exposición a los medicamentos del personal sanitario.

Versátil


La nueva punta ENFit-tip previene las conexiones erróneas con otras aplicaciones clínicas **(Normativa GEDSA e ISO 80369-3).**

Sistema patentado

Nuestras bolsas patentadas son las únicas que se conectan a las jeringas ENFit® de alimentación enteral.

Seguro

Sistema sellado que protege al personal sanitario que manipula medicamentos de la peligrosa exposición a los mismos **(Normativa USP 800).**

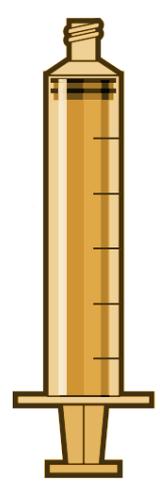

TACKLEN
le ofrece
la mejor calidad

¿COMO FUNCIONA RX CRUSH?

1 Inserte los comprimidos en la bolsa sellada.

1

2 Conecte una jeringa llena de solución al conector ENFit® de la bolsa.

2

3 Aplastar y pulverizar con el rodillo el comprimido.

3



Repita los pasos 4 y 5 tantas veces como sea necesario para eliminar toda la medicación de la bolsa.

4

4 Inyectar la solución de la jeringa en la bolsa y agitar para disolver la medicación.

5

5 Retirar la solución del medicamento en una jeringa.

6

6 Desconecte la jeringa de la bolsa e inserte el medicamento en el tubo enteral.

La bolsa **RX CRUSH®** se conecta a la jeringa ENFit®. Los adaptadores de transición están disponibles para los tubos de alimentación tipo árbol, jeringas orales, jeringas de catéter y jeringas Luer.

MODELOS - FICHA TÉCNICA

CÓDIGO PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

PC11	Dispositivo triturador de medicamentos
PP06	Bolsa de 50 ml con conexión ENFit® de 50 ml
PP1290	Bolsa de alimentación oral




REF:PP06

ACCESORIOS

CÓDIGO PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CA03	Tapón cierre bolsa
EO02	ENFit® para adaptador de punta jeringa oral
EL02	ENFit® para adaptador de Luer Lock

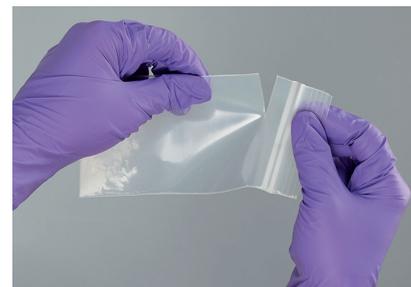

Bolsa apertura fácil alimentación oral
REF:PP1290

FICHA TÉCNICA

Materiales del dispositivo triturador

Base	Aluminio
Saorte	Acero inoxidable
Casquillo	SAE 841 Bronce
Rodillo	PVC sin plastificar
Cubierta del mango	Vinilo
Anillos de retención (debajo de la base)	Acero zincado
Ventosas (debajo de la base)	Caucho natural

Materiales de la bolsa de trituración

Bolsa	Mezcla patentada PET + P,A + PE
Accesorio	Polipropileno (PE)



Tapón REF: CA03



Adpatador oral REF: EO02



Adpatador Luer Lock REF: EL02

Fabricante:



TACKLEN
Distribuidor Exclusivo



Avda. del Parlament, 30 · 08225 Terrassa · Tel.+34 937 888 568 | comercial@tacklen.com · tacklen.com