




TACKLEN

koDakara

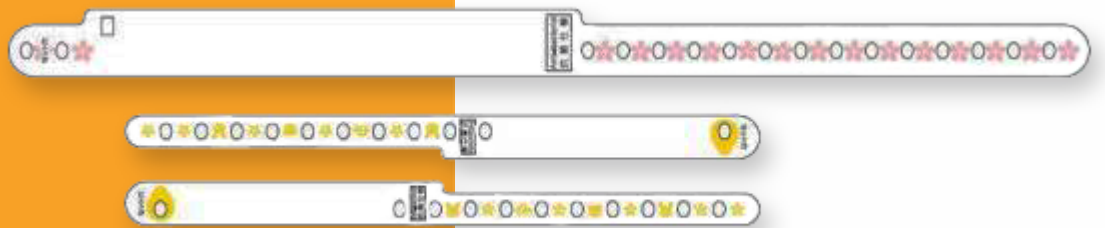

koDakara

SISTEMA DE IDENTIFICACION  
MADRE-HIJO

La correcta identificación del recién nacido es fundamental en las salas de maternidad para asegurar la coincidencia correcta entre madre e hijo después del parto. La pulsera koDakara ha sido diseñada para prevenir posibles errores de identificación en el momento del parto. Este sistema permite, de manera rápida y fácil, imprimir la información del paciente y los códigos de barras necesarios, directamente en la superficie de la pulsera usando nuestra impresora térmica. La pulsera madre/hijo es una pulsera única fabricada en un material ultra suave adecuado para la delicada piel del recién nacido y aporta seguridad a la hora de identificar.

## BENEFICIOS

### Efectivo y seguro



- Elimina completamente los riesgos de confusión del recién nacido, porque la pulsera del bebé solo se separa de la pulsera de la madre y se le pone al bebé, después del parto.
- 2 pulseras para el bebé para colocar en la muñeca o los tobillos. También se pueden usar para gemelos en función de la política de cada hospital.
- Método de impresión por transferencia térmica: sin necesidad de rotular evitando errores de escritura.
- Material suave para el bebé tanto de la pulsera como del clip.
- Material antimicrobiano tanto en las pulseras como en el clip.
- Libre de látex, hierro, óxido de hierro y ftalatos.
- Cumplimiento de la norma Comisión Conjunta Internacional (JCI) que establece que se utilicen al menos dos identificadores.
- Eco-friendly . Uso del material ecológico Econano. Contribuye a la reducción de CO2 cuando se incinera después del uso.

### Fácil uso y versátil

- Ahorro de tiempo para el personal de enfermería.
- 2 colores diferentes para la pulsera madre e hijo evitando errores al separarlas.
- 10 orificios en la pulsera del bebé para el cierre del clip lo que permite ajustarla al tamaño necesario.
- Comparte las mismas propiedades de alta resistencia que las pulseras SATO Soft Type. No hay riesgo de que se borren los caracteres con agua, jabón o desinfectante.
- Clip diseñado específicamente para bebés. Posibilidad de extraer el clip para su ajuste.



## PROTOCOLO DE USO



Una vez introducidos los datos en la ordenador, Introduzca el rollo de pulseras en la impresora



Imprima la pulsera



Separe la pulsera de la madre y del bebé del papel de soporte.



Con las pulseras de la madre y del bebé aún unidas, ponga, a la pulsera de la madre, el clip dual.




Corte el exceso de la pulsera de la madre.



Separe las 2 pulseras de bebé de la pulsera de la madre



Separe las pulseras del bebé para tener 2 pulseras.

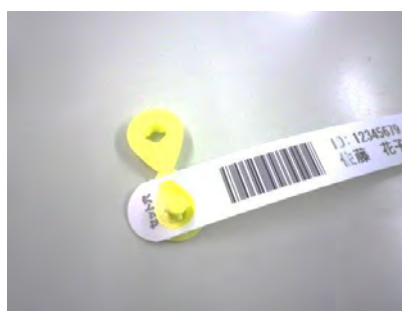

Ponga el clip amarillo a las pulseras de los bebés.



Colóquelo al bebé las pulseras en la muñeca o en el tobillo

## MODELO/FICHA TECNICA

### CONTENIDO DEL KIT:

- 8 rollos por caja (75 pulseeras por rollo / 2 rollos de cinta / 2 núcleos de papel)
- Clips incluidos: 300 x 2 bolsas de clips blandos para adultos, 600 bolsas de clips sencillos x 2 para el bebé
- Manual del usuario

### MATERIAL:

- Pulsera: SATO Soft Type (Tipo 6)
- Cinta: SATO R235B
- Tecnología de transferencia térmica
- Recomendamos la impresora SATO CT4i, SATO CG2 o Sato WS4 para un rendimiento óptimo

