




HIPOALERGÉNICO



IGNÍFUGO

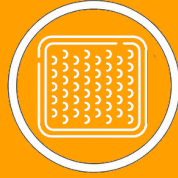


POLIURETANO



RAYOS X



TACKLEN

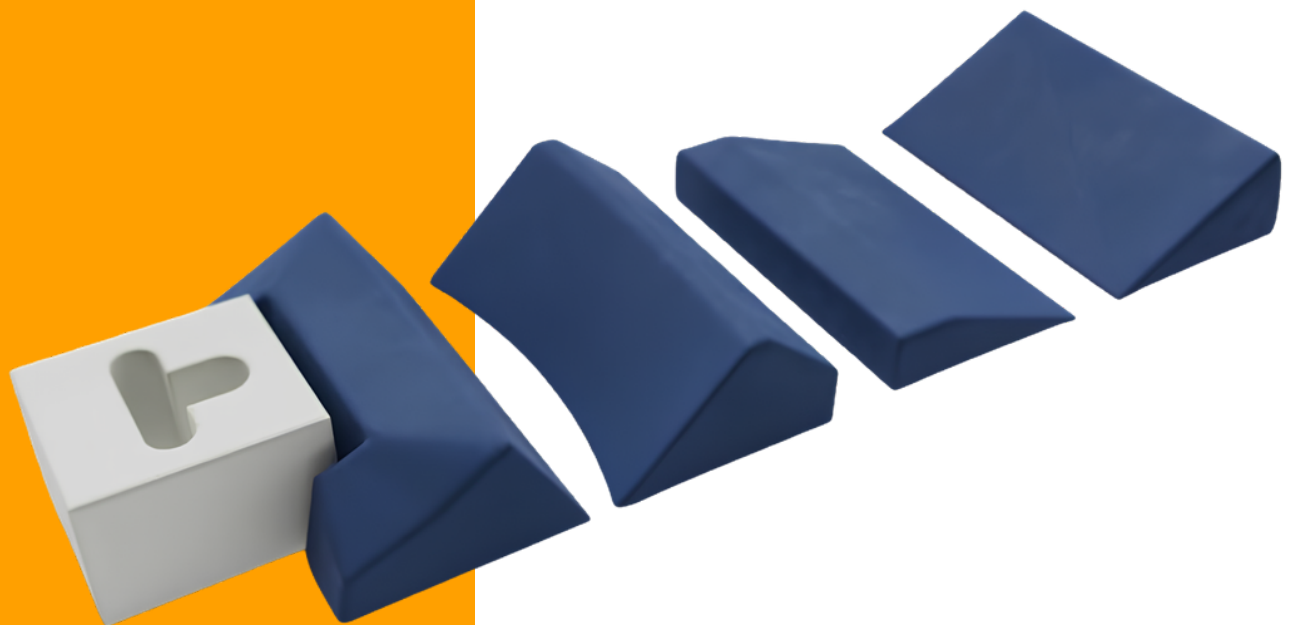

SET DE POSICIONADORES
PRONO para dificultades
respiratorias

POSICIONAMIENTO EN DECÚBITO PRONO PARA DIFICULTADES RESPIRATORIAS

Bi-Prone

Kit de posicionamiento en decúbito prono para pacientes con dificultad respiratoria. Diseñado para facilitar la pronación en pacientes afectados por el SDRA en unidades de cuidados intensivos.



+ Comodidad

+ Modularidad

+ Eficacia del tratamiento

5

Piezas por set (4 cojines + reposacabezas)

134°C

Esterilización en autoclave

95°C

Lavado a máquina, funda extraíble

100%

Poliuretano hipoalergénico

RM·TC

Compatible con rayos X

INDICADO PARA

- + SDRA (síndrome de dificultad respiratoria aguda)
- + Ventilación mecánica
- + Cuidados intensivos (UCI)
- + Prevención de úlceras por presión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Set de posicionamiento para dificultad respiratoria

El SO06830 es un juego de cojines de la línea Bi-Prone, diseñado para facilitar la pronación de los pacientes afectados por el SDRA (síndrome de dificultad respiratoria aguda). El sistema modular se adapta a los contornos del cuerpo, distribuyendo el peso del paciente entre sus cinco puntos de apoyo.

¿Qué es el SDRA?

Es una lesión pulmonar inflamatoria aguda muy extendida que provoca insuficiencia respiratoria grave y que, a menudo, requiere asistencia respiratoria mecánica. La posición prona es una de las estrategias terapéuticas más utilizadas en UCI para mejorar la oxigenación de estos pacientes.




1

Reposacabezas (un solo uso)




2

Cojín Tórax

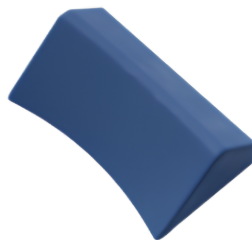

3

Cojín Pelvis

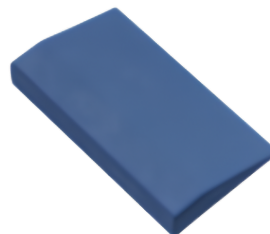

4

Extremidad inf. (muslo)



5

Extremidad inf. (espinilla)

UN SOLO USO

Reposacabezas de poliuretano

Soporte y estabilidad para la cabeza del paciente. Aporta comodidad y ayuda a la prevención de úlceras por presión en la zona facial.

REUTILIZABLES

Cojines de posicionamiento

Funda extraíble de poliuretano bi-elástico y transpirable, pensada para múltiples ciclos de uso, lavado y desinfección.

Ventajas clínicas

- + Mejora la función respiratoria y la oxigenación
- + Reduce la presión sobre tórax y abdomen
- + Previene úlceras por presión

Ventajas operativas

- + Sistema modular, fácil de colocar y retirar
- + Compatible con RM, TC y rayos X
- + Reduce el tiempo de enfermería en el cambio postural






TACKLEN

BI-PRONE · BENEFICIOS CLÍNICOS

BENEFICIO CLÍNICO

Fácil de usar para favorecer la función respiratoria

Se ha demostrado que la posición prona puede mejorar la función respiratoria y la oxigenación en pacientes con SDRA. Al adoptar la posición prona, queda expuesta la superficie dorsal del cuerpo, lo que da lugar a patrones respiratorios que se distribuyen de forma más uniforme entre las regiones dorsal y ventral del pulmón.

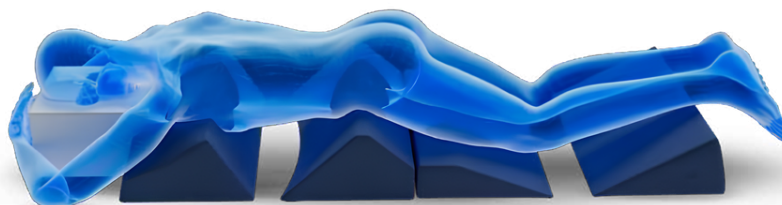


Distribución anatómica del peso corporal sobre los cinco puntos de apoyo del kit Bi-Prone




Expansión pulmonar

Mejora de la expansión pulmonar gracias a la reducción de la presión sobre el tórax y el abdomen.

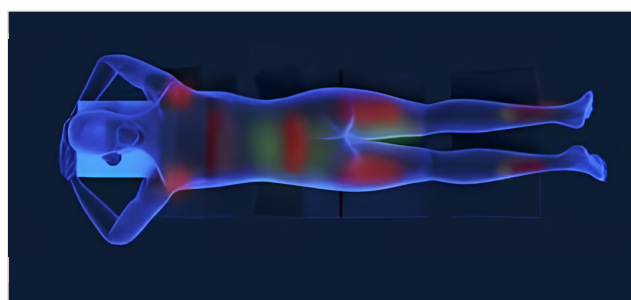

Prevención de úlceras por presión

Distribución homogénea del peso corporal del paciente sobre los puntos de contacto clave.

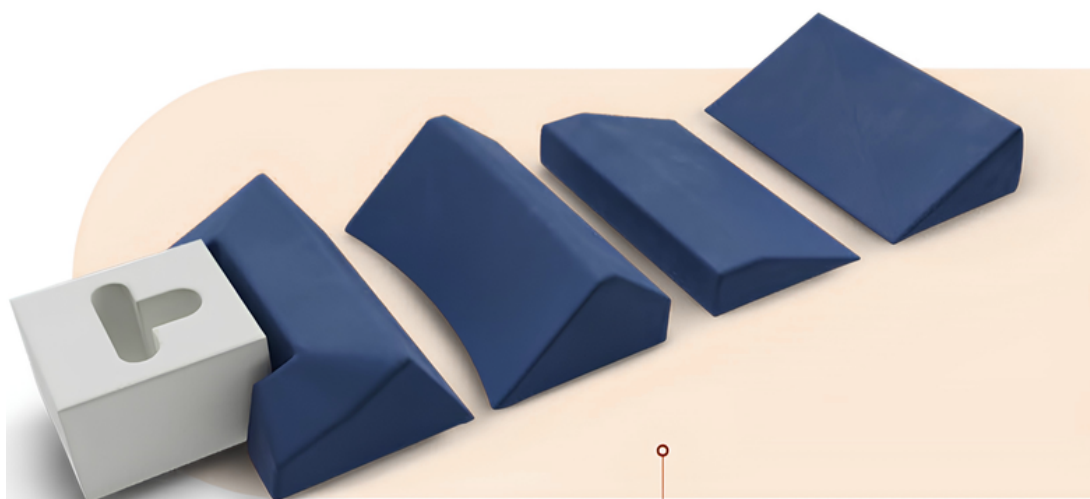

Reposacabezas desechable DE POLIURETANO

- Proporciona soporte y estabilidad a la cabeza del paciente.
- Aporta confort y ayuda a prevenir la aparición de úlceras por presión.

Cojines de posicionamiento reutilizables DE POLIURETANO

- Funda de poliuretano bielástica y transpirable, desenfundable.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Lavable + esterilizable

Fabricado internamente con espuma de poliuretano y recubierto con un tejido de poliuretano microporoso, transpirable, bi-elástico, impermeable, antibacteriano, hipoalergénico y esterilizable. La funda está reforzada con una capa de malla de jersey con cierre de velcro, lo que permite retirarla por completo para su lavado y desinfección.

Nota

La funda es impermeable, antibacteriana e ignífuga, y compatible con los protocolos de higiene hospitalaria más exigentes.

Material funda	Poliuretano bi-elástico
Relleno	Espuma de poliuretano
Cierre	Velcro, funda extraíble
Lavado a máquina	Máx. 95 °C
Esterilización autoclave	134 °C / 3 min
Propiedades	Antibacteriano, ignífugo
Compatibilidad imagen	RM · TC · Rayos X
Uso	Multipaciente (reutilizable)

El reposacabezas de un solo uso completa el kit, aportando estabilidad a la cabeza del paciente durante toda la sesión en posición prona y minimizando el riesgo de úlceras por presión en la zona facial.

REFERENCIAS

Composición del set

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TIPO
SO06830	Juego completo Bi-Prone (4 cojines + reposacabezas)	Set completo
SO03809	Juego de cojines reutilizables (4 unidades)	Reutilizable
SO03809A	Cojín de posicionamiento — Tórax	Reutilizable
SO03809B	Cojín de posicionamiento — Pelvis	Reutilizable
SO03809C	Cojín de posicionamiento — Extremidad inferior (muslo)	Reutilizable
SO03809D	Cojín de posicionamiento — Extremidad inferior (espinilla)	Reutilizable
SO02804A	Juego de reposacabezas anatómicos para posición prona (4 uds.)	Un solo uso