



CÓMODO



MODULARIDAD




PREVENCIÓN



EFICACIA




TACKLEN

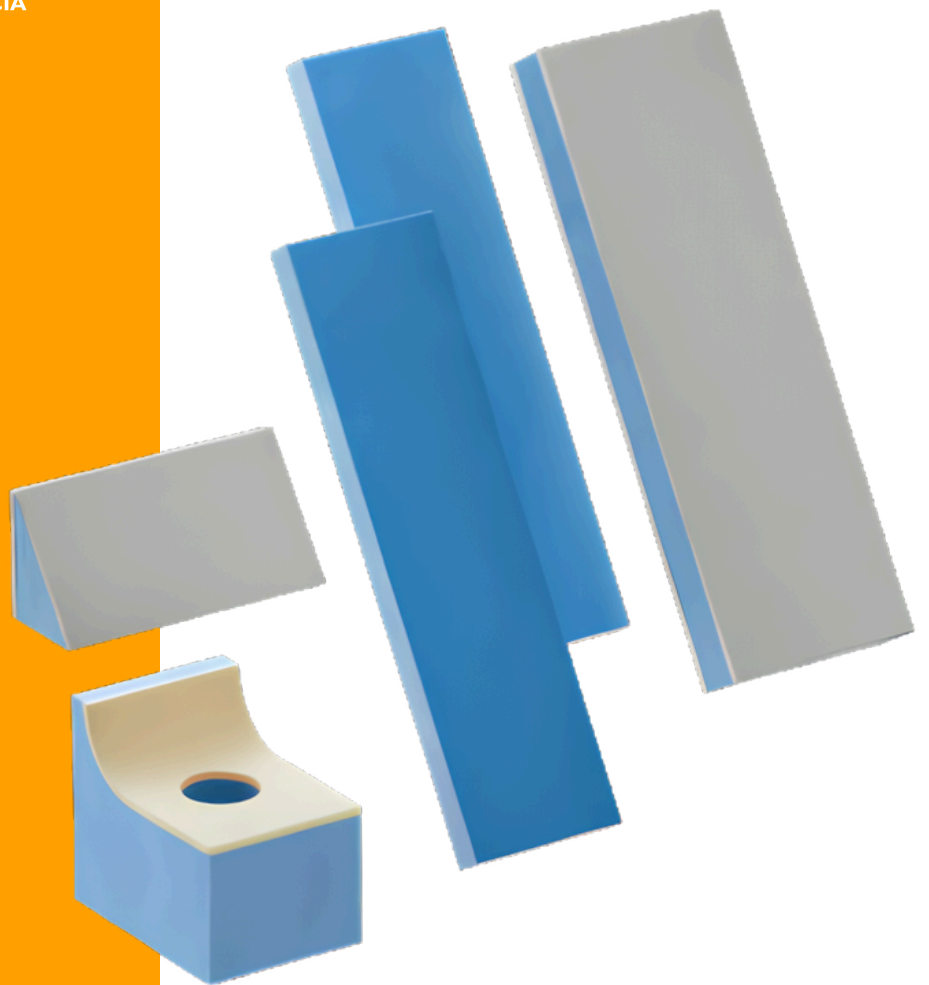


Set de posicionamiento
lateral para QUIRÓFANO

Set de posicionamiento lateral para QUIRÓFANO

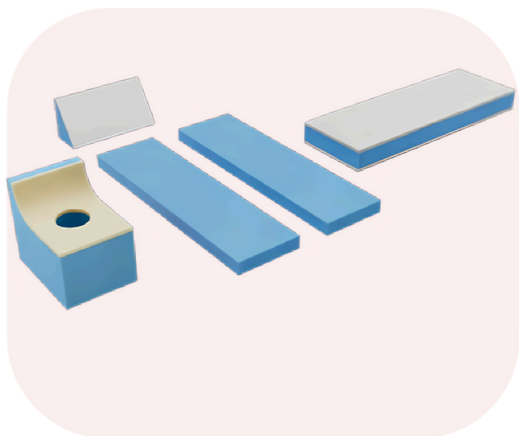

El posicionamiento lateral (o decúbito lateral) se elige durante las intervenciones quirúrgicas cuando se requiere un acceso óptimo a las estructuras torácicas, renales, de la columna lateral o de la cadera. Esta posición permite una mejor exposición de estas regiones anatómicas, reduce el riesgo de úlceras por presión y mejora la visibilidad quirúrgica.

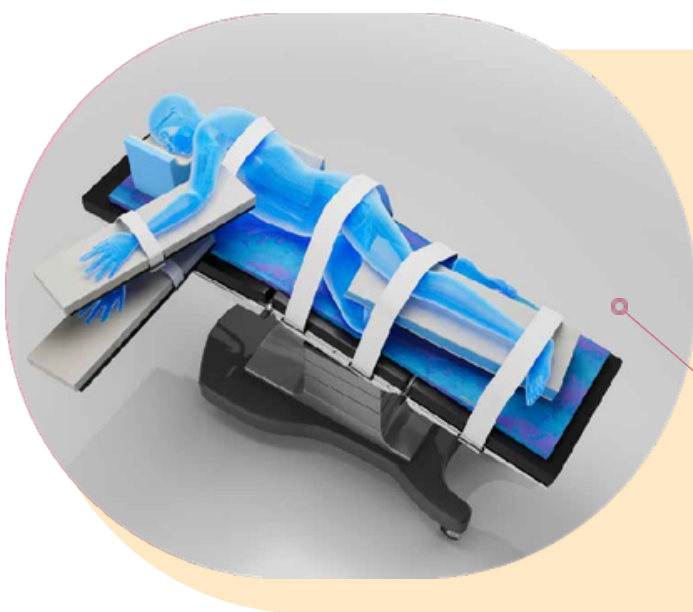

Los principales tipos de PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

que suelen requerir la posición lateral son: cirugía torácica, cirugía espinal lateral/posterolateral, cirugía renal y urológica, neurocirugía

Reducción de ERRORES Y CAMBIOS DE POSICIÓN

El kit está diseñado para mantener la posición correcta del paciente durante todo el procedimiento, lo que minimiza la necesidad de ajustes intraoperatorios. Esto se traduce en menos interrupciones y reposicionamientos, y en un flujo de trabajo quirúrgico mejorado.

LIMPIEZA Y RECICLAJE MÁS RÁPIDOS

Al ser totalmente de un solo uso, el set elimina el tiempo de limpieza y desinfección, agiliza la logística del quirófano y garantiza altos estándares de higiene.

Prevención de úlceras por presión en POSICIONAMIENTO LATERAL PROLONGADO

Octo-Pos es un posicionador de tórax fabricado en espuma de poliuretano, recubierto con una resina de poliuretano mono componente hidrófuga, de alta resistencia, transpirable y libre de bacterias. Su superficie interior presenta un bisel de 45° y formas redondeadas en los puntos de contacto críticos, evitando daños por presión durante intervenciones prolongadas.

Durante el posicionamiento lateral prolongado en decúbito lateral en el quirófano, un factor de riesgo importante es la aparición de lesiones por presión (úlceras por presión/úlceras de decúbito), que son especialmente frecuentes en determinadas zonas anatómicas: trocánter mayor (cadera), escápula/acromion, parte inferior del pabellón auricular (oído externo), rodillas, maléolos (tobillos), costillas/región torácica inferior.

Es fundamental que la columna vertebral y la columna cervical estén correctamente alineadas en la posición de decúbito lateral.

Esta alineación no solo es ergonómica, sino que resulta clínicamente esencial para prevenir complicaciones neurológicas, vasculares y respiratorias, favorecer una mejor recuperación postoperatoria y garantizar la seguridad y la comodidad del paciente, incluso durante intervenciones prolongadas.



ESPUMA
CON
MEMORIA



POLIURETANO




ALINEACIÓN DE LA COLUMNA
VERTEBRAL Y LA COLUMNA
CERVICAL

Los dispositivos médicos que componen el SET SO06840

Los componentes del conjunto están fabricados en espuma de poliuretano con una capa superficial de espuma viscoelástica con memoria, diseñada específicamente para proporcionar soporte en los puntos de presión de alto riesgo.

En comparación con otros soportes (como almohadas, sábanas o almohadillas de gel), se prefiere la espuma viscoelástica porque responde al calor y a la presión del cuerpo, lo que le permite adaptarse al contorno y distribuir la presión de manera uniforme, lo que la hace más eficaz para prevenir las úlceras por presión.

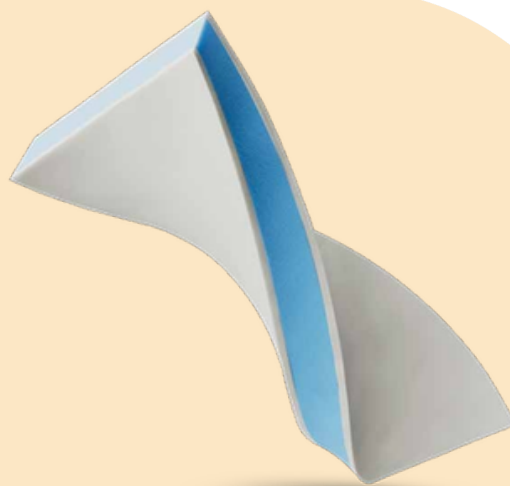

ESPUMA CON MEMORIA




La espuma viscoelástica con regulación térmica mejorada es transpirable y térmicamente estable.

Su diseño de un solo uso garantiza la máxima higiene, eliminando el riesgo de contaminación cruzada.

La estabilidad de posicionamiento

Mantiene la forma y la alineación del paciente durante todo el procedimiento, evitando deslizamientos o micromovimientos involuntarios.

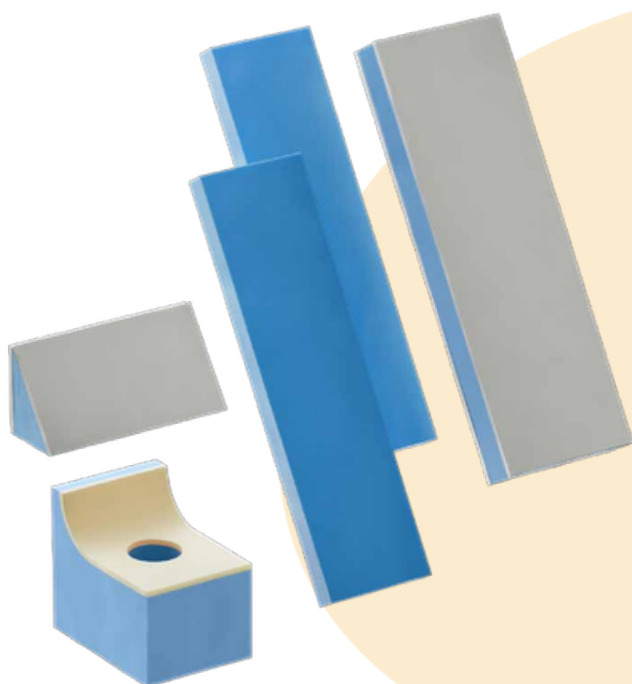

SO06840 se presenta como un kit completo y preconfigurado

Optimiza significativamente el tiempo de preparación tanto para el quirófano como para el paciente.

Esto mejora la eficiencia general, la estandarización y la seguridad, un enfoque cada vez más recomendado en las mejores prácticas perioperatorias, incluidas las directrices internacionales.

El juego consta de


SO02830A

Posicionador lateral ajustable para la cabeza, 28 x 20 x 17/25 cm




SO02838

Separador de extremidades inferiores
76 x 25,5 x 7,5 cm

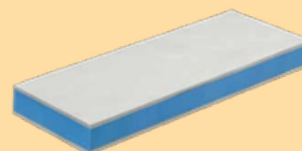


SO02839 (2 uds.)

Almohadilla de apoyo para el brazo
73 x 20 x 4 cm

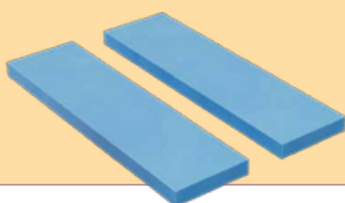

SO02815LC

Almohadilla antideslizante desechable Bi-pad para quirófano 180 x 52 x 3 cm con correas

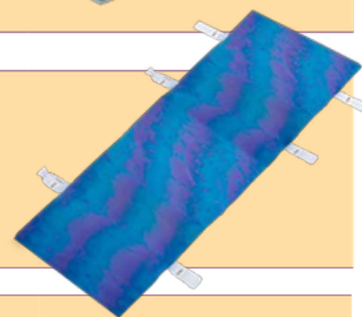

SO02837A

Cuña de posicionamiento de espuma viscoelástica
33 x 15 x 10,5 cm



SO02814 (2x)

Soporte para extremidades con velcro torácicos



SO02815B8 (4 uds.)

Fijación cinturones

